

MINTAVÉTELI AJÁNLÁSOK PARAZITOLÓGIAI VIZSGÁLATOKHOZ

A megfelelően végrehajtott mintavétel a parazitológiai diagnosztika egyik legfontosabb lépése, mely a vizsgálatok sikerességét nagymértékben befolyásolja.

MINTAVÉTEL ÉS MINTATÁROLÁS/SZÁLLÍTÁS MINTA TÍPUSA SZERINT

Széklelet:

- széklelettartályba gyűjtött minimum 4 gramm (mogyorónyi) széklelet
- a mintavételi lapon kérjük feltüntetni a mintavétel pontos időpontját (nap, óra, perc)
- hasmenéses minta érjen a levételtől számított 30-60 percen belül a laboratóriumba
- 10 napos intervallumon belül, lehetőleg nem egymást követő napokon gyűjtött 3 minta az optimális: pl. 1.,3. és 5. napokon
- szállításig a minta hűtőben (4-8°C) tárolandó

Vér:

- 1 cső natív vér (lehetőleg sárga kupakos, ennek hiányában piros kupakos is megfelelő): szállításig hűtőben (4-8°C) tárolandó
- vérszérum: a mintavétel helyén egy vérvételi csőnyi (6-8 ml) vér lecentrifugált széruma steril csőben, betegadatokkal feliratozva: szállításig hűtőben (4-8°C) tárolandó, de csak max. 5 napig, ennél hosszabb tárolás esetén a szérum -20°C-on tárolandó

Vizelet:

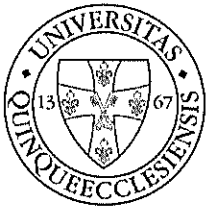
- zárt, steril edényben
- szállításig a minta hűtőben (4-8°C) tárolandó

Aspirátum, tömlőbennék, váladékok:

- zárt, steril edényben
- szállításig a minta hűtőben (4-8°C) tárolandó

Perianális törlés:

- reggeli órákban az anus környékéről, átlátszó ragasztócsíkkal vett lenyomatot kell felragasztani steril tárgylemezre
- a tárgylemezt olyan módon kell szállítani, hogy annak eltörését és más sérülését, illetve a felületén található minta károsodását megelőzzük, a tárgylemez ne érintkezzen szorosan sem egyéb mintával, sem a szállító edénnyel.

**Parazita gyanús képlet:**

- megfelelően zárt edényben (lehet széklettartály vagy egyéb is)
- férgek esetén, ha az a széklettel ürült és belefér a széklettartályba, lehet így is beküldeni, de széklettel külön is. Utóbbi esetben vagy 70%-os etanolban, vagy fiziológiás sóoldatban, vagy ezek nélkül magában (DE NEM FORMALINBAN!), zárt edényben
- egyéb helyről eltávolított féreg (vagy annak darabja) 70% etanolban, vagy fiziológiás sóoldatban, vagy ezek nélkül magában (DE NEM FORMALINBAN!), zárt edényben

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

A mintavételi eszköz beszerzéséről a beküldő (megrendelő) gondoskodik.

A mintavétel és a vizsgáló laboratóriumba történő szállítás szakszerűsége és megfelelősége a megrendelő felelőssége.

Kérjük, minden esetben maximális gondossággal járjon el a fertőző biológiai anyagok vétele, csomagolása és szállítása során! Mindig csak az adott mintavételhez rendszeresített mintavételi eszközt és csomagolást használjon!

A papír alapú vizsgálatkérő lap, valamint a laboratórium Szolgáltatási jegyzéke honlapunkon elérhető: <https://old.aok.pte.hu/hu/egyseg/dokumentumok/220>

Amennyiben további segítségre van szüksége a parazitológiai mintavétellel kapcsolatban, akkor kérjük, egyeztessen előzetesen telefonon (06-72/536-000/31399) a laboratóriummal!

Készítette:

Dr. Palkovics Tamás
laboratóriumvezető

2024. augusztus 27.





OMII-ER02-M01

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM

Klinikai Központ
Orvosi Mikrobiológiai és Immunitástani Intézet

Jóváhagyta:

Prof. Dr. Reuter Gábor,
intézetigazgató



Felülvizsgálva:

