

2021

ELEKTRONIKUS LÁZLAP rövid használati útmutató

Készítette: Gubányi Judit, Szűcs Péter



Kedves Kollégák!

Ez az összefoglaló egy nagyon rövid verziója az ICCA/ ICIP használatának, valójában csak egy emlékeztető. A teljes használati útmutató nélkül NEM használható. A célja az, hogy aki meghallgatta a teljes verziót (ami első hallásra nagyon tömény és riasztó), felidézhesse egy kis segítséggel az ott hallottakat. Kérlek benneteket, ezzel a kitéttel használjátok. A teljes verzió elérhető a következő linken:

<https://drive.google.com/file/d/1h5D2QZwC3glGnZ1nUOEX1bIqVtoErXaL/view?usp=sharing>


Tartalom

BETEGFELVÉTEL	2
FELVÉTELI DOKUMENTUMOK	3
MONITOR PARAMÉTEREK	5
FOLYADÉKCLAP	7
KÁBÍTÓ FÁJDALOMCSILLAPÍTÓK PUMPA CSERÉJE ÉS MEGSEMISÍTÉSE.....	10
GYÓGYSZEREK, VIZITRENDELÉSEK.....	13
PUMPÁK TÁRSÍTÁSA.....	15
MŰSZAK ÁTADÓ	19
LABORATÓRIUMI EREDMÉNYEK.....	21
ELBOCSÁTÁS	23



PTE KLINIKAI KÖZPONT

Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézet

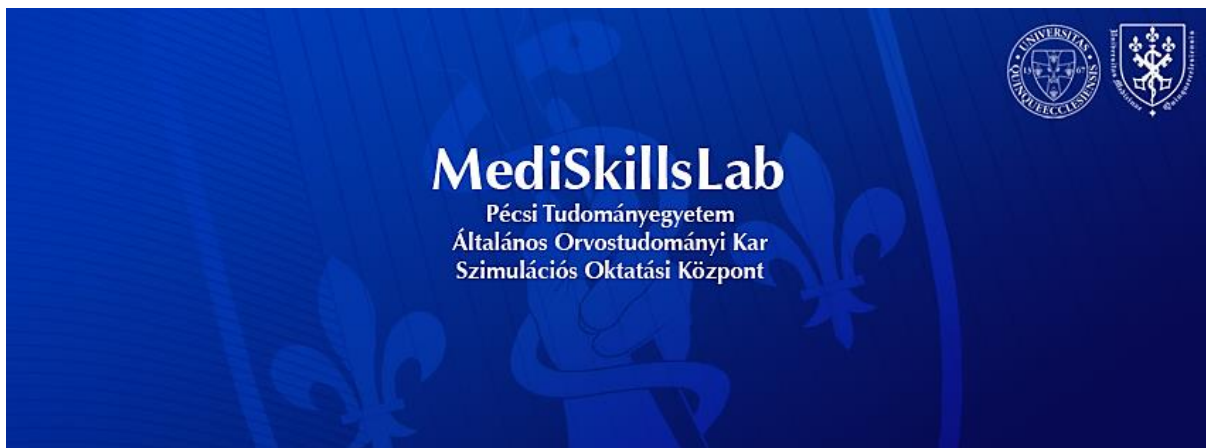

BETEGFELVÉTEL

Központi monitorba:

-amelyik ágyra fel akarom venni a beteget, azon a monitoron rákattintok a „beteg kezelése” ablakra (alsó sor kockák visszafelé harmadik)

-a lenyíló ablakban rákattintok a „beteg keresése” sorra (jobb oldalon legfelül)

-beírom a beteg vezetéknevét – ez általában elég - , és a kis ablakban rákattintok a „keresés” gombra

-ha a beteg a Medsol-ban már fel van véve, a monitor megtalálja, felajánlja az adatokat – itt kattintással kiválasztom, utána „OK” gomb, és a rendszer felveszi a beteget a központi monitorba **ÉS A LÁZLAPBA IS**

FELVÉTELI DOKUMENTUMOK

Fájli Szerkesztés Nézet Beteg/karton Dokumentum Eszközök Ablak Súlyó Pic Teszt GYK

ITO 3 - GYORS felvétel



Felvételi dokumentumok Monitor paraméterek Folyadéklap Jegyzetek Rendelések Rendelés bevitelle Gyógyszer-adagolási jegyzőkönyv Gyógyszerek áttekintése Vízitrendelési jegyzőkönyv Munkamappa Labor eredmények Összefoglalás

Fedőlap 2019.01.19. 14:16

Felvételi űrlap


Beteg neve	* <i>Teszt Piroska</i>
Vezetéknév	<i>Teszt</i>
Keresztnév	<i>Piroska</i>
Utónév	
Előtag	
Álnév az adatvédelemhez	
Kórházi betegazonosító	
Esetszám	* <i>03020104</i>
Születési dátum	<i>1911.01.19.</i>
Életkor felvételtkor (számított)	<i>108 év</i>
Nem	
Speciális állapot	
Felnevő orvos	
Allergiák	<i>Penicillin/cefalosporinok - Van allergiája</i>
Állapot	<i>Van allergiája</i>
Fennáll latexallergia?	
Allergiák	
Allergiák 1	<i>Penicillin/cefalosporinok</i>
Típus	<i>Gyógyszerallergia</i>
Allergén	* <i>Penicillin/cefalosporinok</i>
Súlyosság	<i>Súlyos</i>
Reakció	<i>Anafilaxia</i>
Azonosítás dátuma	
Érzékenység	
Állapot megerősítése	
Jelentés dátuma	
Jelentkezés dátuma	
Megjegyzés	
Kórházi szolgáltatás	
Készen áll elbocsátásra?	
Demográfiai adatok	
Felvételi dátum/idő	
Felvétel forrása	
Elsődleges diagnózis	


-a **Fedőlap**-ot kinyitva ezen az oldalon tudom beírni az allergiákat, (+ jelre kattintva lenyílnak a lehetőségek), a „speciális állapotok” sorba pedig az utasításokat lehet beírni, amit minden műszaknak tovább kell adni (a teszt betegnél az látható, hogy „nem forgatható”, de bármit írhatunk, csak nem túl hosszan, limitált a karakterek száma)

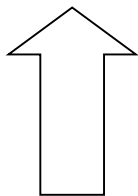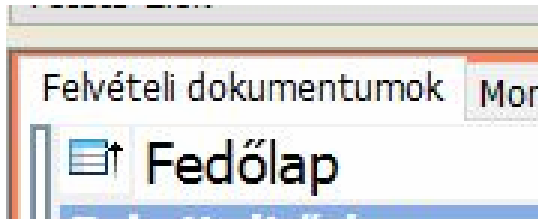

A piros csillaggal jelölt sorok kitöltése kötelező. Az „esetszám” sorában levő szám megegyezik a medsol „vizitszám” jelölésű adatával. Ha ez stimmel, akkor minden labor adat átjön a Medsolból akkor is, ha a többi adat nem egyezik (ismeretlenül érkező beteg, akinek később kiderült a neve: ha az esetszámot nem változtatom, áthozza az adatokat)

MONITOR PARAMÉTEREK

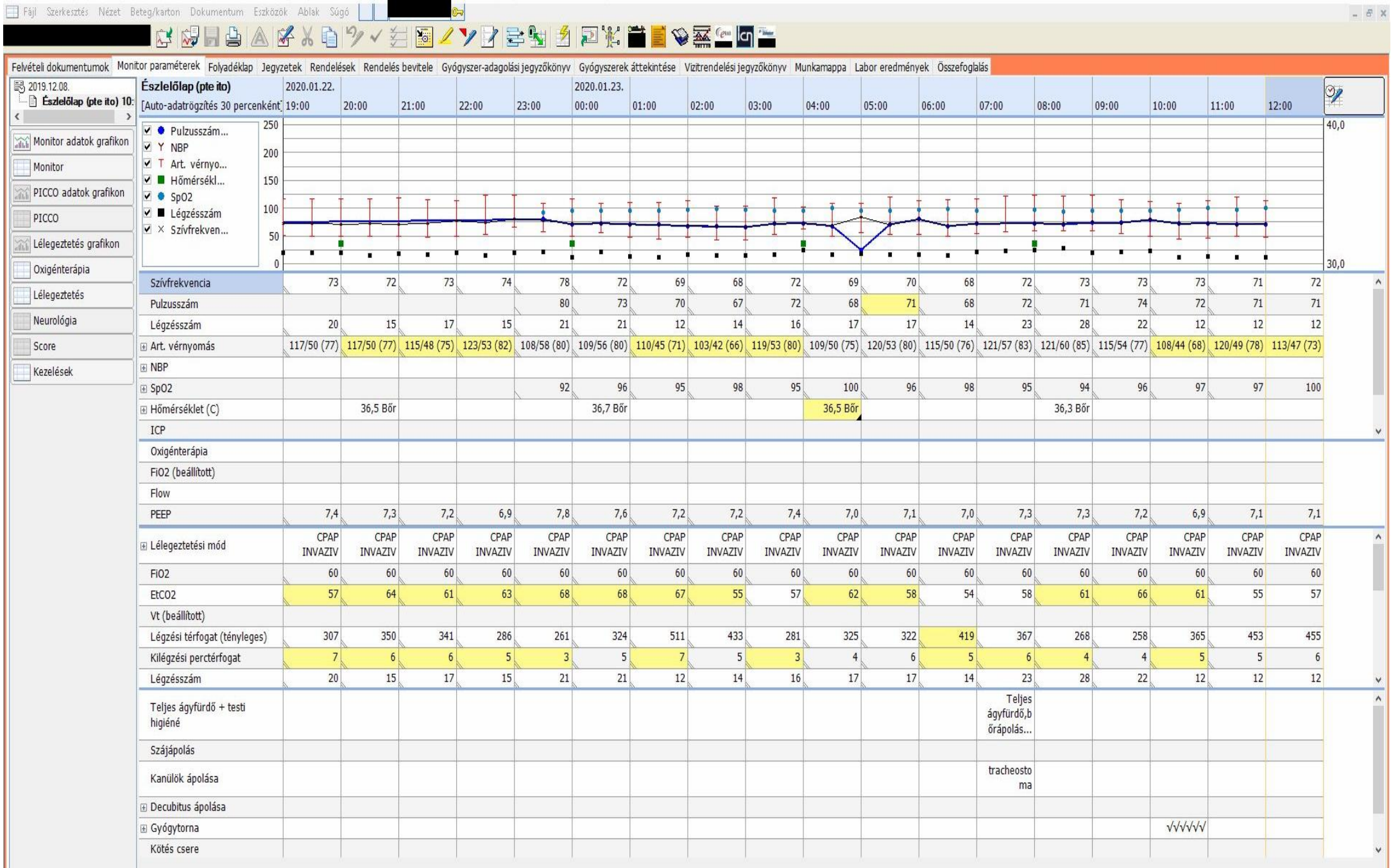

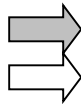

Be tudom állítani, hogy az adott lap (itt a „monitor paraméterek” milyen értékeket mutasson (fehérrel jelölve), és milyen értékeket rejtessen el (szürke funkciógomb); az elrejtett értékeket is méri, csak nem jeleníti meg. Van egy alap adatsor, de ha nekem más kell, tudok sorokat hozzáadni vagy eltávolítani. Ez a funkció mindig ahhoz a laphoz tartozik, ahol épp vagyok.


Paraméter	Állapot	Érték
Pulzusszám...	<input checked="" type="checkbox"/>	250
NBP	<input checked="" type="checkbox"/>	200
Art. vérnyo...	<input checked="" type="checkbox"/>	150
Hőmérsékl...	<input checked="" type="checkbox"/>	150
SpO2	<input checked="" type="checkbox"/>	100
Légzésszám	<input checked="" type="checkbox"/>	100
Szívfrekven...	<input checked="" type="checkbox"/>	50



A „sorok hozzáadása” ikont kinyitva megjelennek a lehetőségek, hogy mit tudok még az adott paraméterhez adni: pl. a „monitor paraméterek” tartalmaz egy „ICP” nevű adatot, amit kivehetek, viszont hozzá adhatok egy „CVP” nevű adatot, ha azt akarom használni. AMELYIK ADATOT KIVESZEM A SORBÓL, AZ TÖBBÉ NEM JELENIK MEG, AMÍG VISSZA NEM TESZEM. Elég sok előre paraméterezett adat van a listában, de nincs minden, viszont MINDEN LISTA TARTALMAZ EGY „EGYÉB” VAGY „EGYEDI” nevet, amit elnevezhetek bárminek, aminek szeretném. Ezen a lapon ennek annyi a hátulütője, hogy minden órában, amikor adatot írok a hozzáadott helyre, be kell írnom a nevet. Tehát a hozzáadott sor „egyéb” lesz, az adott órához pedig beírom, hogy „bal láb körfogat”, a mennyiséghez pedig „68 cm”

A **monitor paraméterek** lap automatikusan rögzít minden adatot, ami a betegőrző monitoron keresztül érkezik: a vitális paramétereket, megfelelően csatlakoztatott lélegeztetőgép esetén pedig a lélegeztetési paramétereket. Azt kell csak kézzel írni, amit a monitor nem lát (oxigén terápia: itt kézzel kell beírnom, hogy maszk vagy orrszonda, az oxigén koncentrációt, és az áramlást); ha lélegeztető gépről megy a nasal high flow kezelés, AZT IS KÉZZEL RÖGZÍTEM, mert ilyenkor a respirátor nem lélegeztet, csak levegő-oxigén keveréket fúj, de ez nem küld adatot a monitorba, így a lázlapba sem.

FOLYADÉK LAP

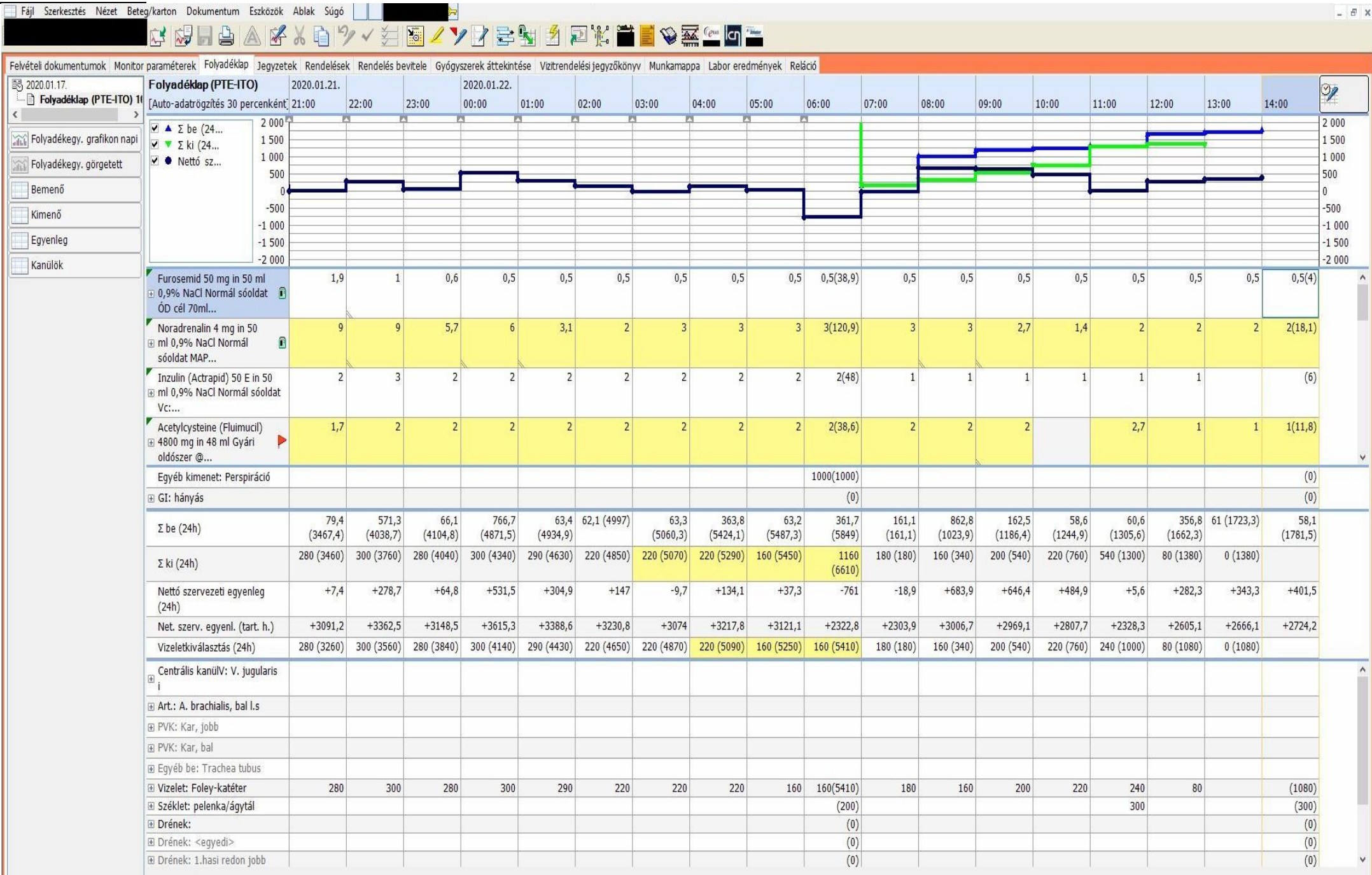

Ezen a lapon jelennek meg a bevitt folyadékok (infúziók, gyógyszerek, tápszerek), és az ürített folyadék mennyiségek (vizelet, izzadás, drének, stb); ez a lap tartalmazza a mindenkori aktuális egyenleget, reggel 6-kor kiszámolja az elmúlt 24 óra egyenlegét, valamint a beteg görgetett egyenlegét a betegfelvétel óta.

Az újonnan felvett beteg folyadék lapja üres, mivel még egy kanül sincs hozzá adva, nem tudunk folyadék egyenleget írni. Először hozzáadjuk a kanüloket . A „kimeneti helyek” – „kanülok” fül alatt nem csak valódi kanülok vannak, itt van pl. a trachea tubus is; ez tartalmaz mindenféle idegen tárgyat, ami a betegbe került. Megnyitjuk a „Folyadék lap” fület, az ikonsorban kinyitjuk a „sorok hozzáadása”

Itt kiválasztom a „Kanülok” opciónál azt a bemeneti vagy kimeneti helyet, amit szeretnék a folyadék lapon látni, egérrel kiválasztom, és a „hozzáad” feliratra kattintok (vagy két bal klikk is hozzáadja az adott dolgot)

Ami még fontos, itt lehet az időpontra módosítani (felugró ablak jobb felső sarok). Ez akkor érdekes, ha a beteg korábban érkezett, de a lapok hozzáadását csak később teszem meg, mert nem tudok mennyiséget beírni a hozzáadás előtt. Ha elmentettem a bevitt kanüloket, kinyitom a sorokat, a „behelyezés ideje” kockába beírom a dátumot (csak napot tudok írni, órát nem), ha tudom, ki helyezte be, a nevet is.

A rendszer minden gyógyszer sorában az utolsó bevitel után egyenleget számol, a napi egyenleget 06:00-kor számolja ki, ez bekerül a göngyöltett egyenlegbe, 07:00 órától újra kezdi a számolást. Tehát a perspirációt MINDIG 06:00-ra, vagy azelőtti időpontra kell beírni, különben csak a másnapi egyenlegbe számít bele.

Fájli Szerkesztés Nézet Beteg/karton Dokumentum Eszközök Ablak Súgó Judit Gubányi

ITO 3 - GYORS felvétel

Felvételi dokumentumok Monitor paraméterek Folyadéknap Jegyzetek Rendelések Rendelés bevittele Gyógyszer-adagolási jegyzőkönyv Gyógyszerek áttekintése Vízrendelési jegyzőkönyv Munkamappa Labor eredmények Összefoglalás

2019.01.17. Folyadéknap (PTE AITI 2) 2019.01.18.

[Auto-adatrögzítés 5 percenként]

	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	
Σ be (24h)																			2 000
Σ ki (24h)																			1 500
Nettó szerveti egyenleg (24h)																			1 000
Net. szerv. egyenl. (tart. h.)																			500
																			0
																			-500
																			-1 000
																			-1 500
																			-2 000

Egyéb kimenet: Perspiráció

GI: hányás

Σ be (24h)

Σ ki (24h)

Nettó szervezeti egyenleg (24h)

Net. szerv. egyenl. (tart. h.)

Sorok hozzáadása és eltávolítása

Sor hozzáadás/megszakítás ideje: 2019.01.18. 18:19 Időt módosít...

Egyes sorok **Sortípusok**

Elérhető sorok

- Vizelet: Szuprapubikus
- Vizelet: pelenka /ágytál
- Vizelet: Alhas stomazsák
- Vizelet: <egyedi>
- Széklet: pelenka/ágytál
- Széklet: Has, jobb stomazsák (anus)
- Széklet: Alhas, bal stomazsák (anus)
- Széklet: Végbélnyílás "Flexiseal"
- Melkas: Melkas alsó része, jobb pleuradrain 2.
- Melkas: Melkas, jobb pleuradrain 2.
- Melkas: Melkas alsó része, bal pleuradrain 2.
- Melkas: Melkas, bal pleuradrain 2. l.
- Melkas: pleurakanül l.d.
- Melkas: Pleurális, bal pleurakanül l.s
- Melkas: Mediasztinális
- Melkas: pericardialis
- Melkas: <egyedi>
- Drének: Nyak, bal
- Drének: Nyak, jobb
- Drének: Alhas, bal 3. l.s
- Drének: Felhas, bal 3. l.s
- Drének: Alhas, inh 3. l.d

Hozzáad >

< Eltávolít

Folyadéknap (PTE AITI 2)

- Folyadéknap: grafikon napi
- Folyadéknap: görgetett
- Bemenő
- Kimenő
- Egyenleg
- Kanülök
- Centrális kanülV: V. jugularis interna, jobb
- Art.: A. radialis, jobb l.d.
- Vizelet: Foley-katéter
- Széklet: Has, jobb stomazsák (anus.prena)
- Drének: Nyak, jobb
- Diéta típusa

Keresés

OK Mégse

KÁBÍTÓ FÁJDALOMCSILLAPÍTÓK PUMPA CSERÉJE ÉS MEGSEMISÍTÉSE

A szoros számadású, könyvelt gyógyszereknél pontosan kell vezetni, mikor cserélünk perfuzort, és ha leállítják, vagy a beteg eltávozik, és marad a gyógyszerből, meg kell semmisíteni pontosan beírva a mennyiséget.

Ezek a leggyakrabban használt gyógyszerek:

Morfin

Sufentanil

Fentanil

Dolargan

Fentanil tartalmú EDA koktélok

Fentanil tartalmú TTS tapaszok

A „Vizitrendelési jegyzőkönyv” fülön a RENDELÉSBEN bal egérgombbal rákattintok a gyógyszer nevére, ekkor felugrik az az ablak, amiben a rendelés tulajdonságai vannak, alapesetben a „Részletek” fül. Kiválasztjuk az „Összefoglalás” fület, ide be tudjuk írni a pumpa cserék időpontját és a gyógyszer megsemmisítését. Saját kóddal elmentjük, így bekerül a lázlapba a csere időpontja.

Ha megsemmisítünk gyógyszert, akkor is beírhatjuk hogy mennyit dobtunk ki, de **MINDENKÉPPEN ORVOS KÓDDAL KELL ELMENTENI, HOGY HIVATALOS LEGYEN.** Itt ez az aláírás

Víztrédelési jegyzéknyv Allergiák: Aspirin - Van allergiája Spec. állapot vércsoport: • Dg: légzési elégtelenség • ;; gyógyszereket Glucose-ban kell • ;; • ;; • Study no.:

Víztrédelési jegyzéknyv : Mind	2020.11.26.	2020.11.27.	2020.11.28.	2020.11.29.	2020.11.30.	2020.12.01.	2020.12.02.	2020.12.03.	2020.12.04.
[24 óránként]	0:00 - 23:59	0:00 - 23:59	0:00 - 23:59	0:00 - 23:59	0:00 - 23:59	0:00 - 23:59	0:00 - 23:59	0:00 - 23:59	0:00 - 23:59
Amiodaron (Cordarone) 900 mg in 48 ml 5% Glucose oldat ; 48 ml									
Imipenem (Tienam) 250 mg IV 6 óránként	<input type="checkbox"/> 2:00 - késik <input type="checkbox"/> 8:00 - késik <input type="checkbox"/> 14:00 - késik <input type="checkbox"/> 20:00 - késik	<input type="checkbox"/> 2:00 - késik <input type="checkbox"/> 8:00 - késik <input type="checkbox"/> Függőben itt: 14:00 <input type="checkbox"/> Függőben itt: 20:00	<input type="checkbox"/> Függőben itt: 2:00 <input type="checkbox"/> Függőben itt: 8:00						
Morphin 1 mg IV Szükség szerint		2 itt: 7:00 2 itt: 9:00							
Sufentanyl 50 µg in 50 ml 0,9% NaCl Normál sóoldat ; 50 ml	Beadva itt: 22:00	2 itt: 12:00							
Morphin 1 mg IV Szükség szerint									

Eálj Szerkesztés Nézet Beteg/karton Dokumentum Eszközök Ablak Sínó Judit Gubányi
 Fáj Szerkesztés Nézet Beteg/karton Dokumentum Eszközök Ablak Sínó Judit Gubányi
 Teszt Norbi Zsolt

Felvételi dokumentumok Monitor paraméterek Folyadéknap Jegyzetek Rendelések Rendelés bevitel

Vízrendelési jegyzőkönyv Allergiák: Aspirin - Van allergiája Spec. állapot vércsoport

Vízrendelési jegyzőkönyv : Mind
 [24 óránként] Közvetlen orvosi bevitel

- Amiodaron (Cordarone) 900 mg in 48 ml 5% Glucose oldat ; 48 ml
- Imipenem (Tienam) 250 mg IV 6 óránként
- Morphin 1 mg IV Szükség szerint
- Sufentanyl 50 µg in 50 ml 0,9% NaCl Normál sóoldat ; 50 ml
- Morphin 1 mg IV Szükség szerint

A következő tulajdonságai: iv.ITOlistásP/Vp

Rendelések
 Sufentanyl 50 µg in 50 ml 0,9% NaCl Normál sóoldat ; 50

Összefoglalás Részletek Előzmények Pumpák
 Sufentanyl 50 µg in 50 ml 0,9% NaCl Normál sóoldat ; 50 ml

Megjegyzések:
 pumpa csere 11.26 18:05 X.Y
 pumpa csere 11.27 02:03 V.W.
 18 µg megsemmisítve 2020.11.27 dr. Gipsz Jakab

OK Mégse

	2020.12.02.	2020.12.03.	2020.12.04.
59	0:00 - 23:59	0:00 - 23:59	0:00 - 23:59

GYÓGYSZEREK, VIZITRENDELÉSEK

A gyógyszereket és vizit rendeléseket több helyen lehet látni és jóváhagyni, de a „Folyadék lap” és a „Vizitrendelési jegyzőkönyv” mindent tartalmaz, ha ezt a kettőt használjuk, biztos nem marad ki semmi.

A „Munkamappa” fontos segítség; ez a lapon órára lebontva mutatja a teendőket, így biztosan meglátjuk, hogy az adott órában mit kell csinálni.

A különböző lapok MIND UGYANANNAK A RENDELÉSNEK A MÁS-MÁS NÉZETEI: HA EGY LAPON KIPIPÁLUNK VALAMIT, A TÖBBI LAPON IS KÉSZNEK KÖNYVELI EL, nem kell többször pipálni.

A folyadék lapon tudjuk vezetni az infúziókat, injekciókat, draineik öblítését, táplálást, de nincsenek rajta a tabletták, cseppek, labor rendelések, egyéb vizit rendelések. Ezeket a „Vizit rendelési jegyzőkönyv” –ben találjuk. A gyógyszer beadásokat itt is jelezni tudjuk, itt láthatóak a vizsgálat kérések, labor rendelések, beteggel való teendők.

A gyógyszereket itt tudjuk bejelölni, szükség szerint módosítani a beadási időt

Fáj Szerkesztés Nézet Beteg/karton Dokumentum Eszközök Ablak Súgó Judit Gubányi

ITO 3 - Teszt Piroska

Felvételi dokumentumok Monitor paraméterek Folyadéknap Jegyzetek Rendelések Rendelés bevétele Gyógyszer-adagolási jegyzőkönyv Gyógyszerek áttekintése Vízrendelési jegyzőkönyv Munkamappa Labor eredmények Összefoglalás

Vízrendelési jegyzőkönyv Allergiák: Penicillin/cefalosporinok - Van allergiája Felvételi testsúly: • Testmagasság (cm): • BSA:

Vízrendelési jegyzőkönyv : Mind [24 óránként]

	2019.01.18. 0:00 - 23:59	2019.01.19. 0:00 - 23:59	2019.01.20. 0:00 - 23:59	2019.01.21. 0:00 - 23:59	2019.01.22. 0:00 - 23:59	2019.01.23. 0:00 - 23:59	2019.01.24. 0:00 - 23:59	2019.01.25. 0:00 - 23:59	2019.01.26. 0:00 - 23:59
EKG Ma		<input type="checkbox"/> Függőben itt: 14:28							
▶ Enterális tápszerek, szondatápok rendelése DIBEN 30 ml/óra									
▶ Enterális tápszerek, szondatápok rendelése Víz, folyadék 10 ml/óra									
▶ Inzulin (Actrapid) 50 E in 50 ml 0,9% NaCl Normál sóoldat									
▶ Laboratóriumi v: Azonnal felvételi labor: ion, vese,...		<input type="checkbox"/> Függőben itt: 14:28							
▶ Noradrenalin 20 mg in 50 ml 0,9% NaCl Normál sóoldat									
▶ Pantoprazol (Controloc) 40 mg IV 12 óránként		<input type="checkbox"/> Függőben itt: 20:00	<input type="checkbox"/> Függőben itt: 8:00						
▶ T. Xanax 0,25 mg Egyéb Naponta 2X		<input type="checkbox"/> Függőben itt: 15:00	<input type="checkbox"/> Függőben itt: 8:00						
▶ T. Xanax 0,5 mg Egyéb Naponta 1x este		<input type="checkbox"/> Függőben itt: 22:00							
▶ vc mérése		<input type="checkbox"/> Függőben itt: 15:00 <input type="checkbox"/> Függőben itt: 17:00 <input type="checkbox"/> Függőben itt: 19:00 <input type="checkbox"/> Függőben itt: 21:00 <input type="checkbox"/> Függőben itt: 23:00	<input type="checkbox"/> Függőben itt: 1:00 <input type="checkbox"/> Függőben itt: 3:00 <input type="checkbox"/> Függőben itt: 5:00 <input type="checkbox"/> Függőben itt: 7:00 <input type="checkbox"/> Függőben itt: 9:00 <input type="checkbox"/> Függőben itt: 11:00 <input type="checkbox"/> Függőben itt: 13:00						

Warning


2019.01.19. 14:32

PUMPÁK TÁRSÍTÁSA


Ez a funkció nagyon nagy segítség, mert rengeteg időt spórol nekünk. A felírt gyógyszerekkel társított perfuzorok aktuális sebességét A LÁZLAP RÖGZÍTI, nem kell azt óránként beírni. A gyógyszer sorában jelzi az aznap (reggel 7-től) összesen beadott gyógyszer mennyiséget, a bólusokat.

A perfuzorban menő gyógyszereket hozzá tudom rendelni a pumpákhoz (amennyiben a technikai háttér megvan hozzá) kétféleképp is.

Az egyik: a folyadék lapon a gyógyszerre kattintok jobb egér gombbal, a felugró opciók közül kiválasztom a „pumpa társítása” funkciót, majd kiválasztom a pumpát, bal klikk, és máris hozzáadja

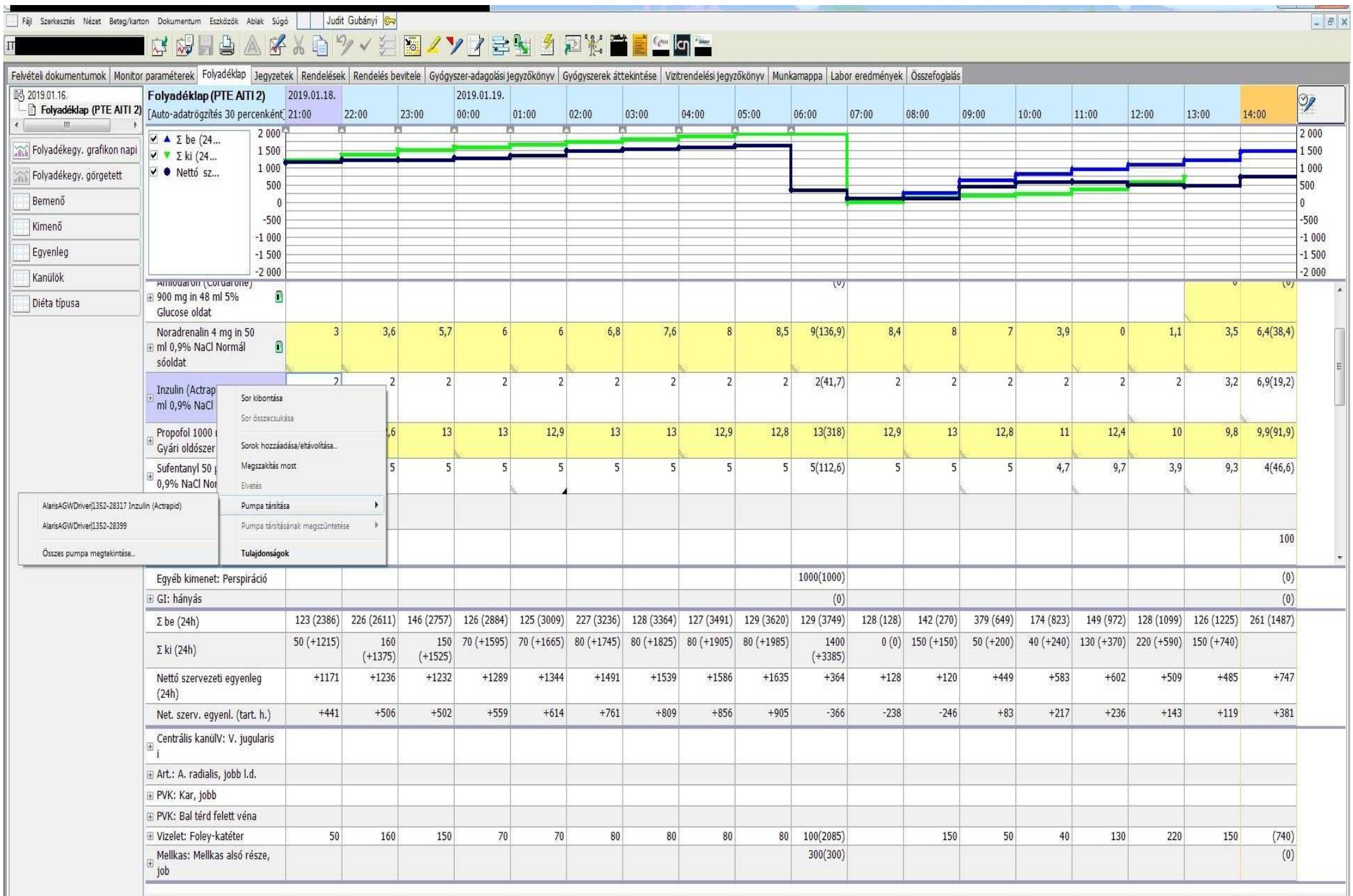

A másik: a felső ikon sorból kiválasztom a „Pumpák társítása” ikont,

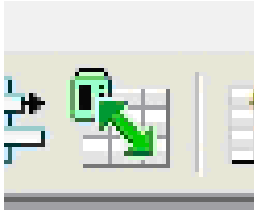

majd a felugró ablakban összehozom a pumpákat a gyógyszerekkel. Egyszerre egyet lehet párosítani, de mindegyiket meg lehet csinálni, az OK után minden pumpa társítva van.

Fájlok Szerkesztés Nézet Beteg/karton Dokumentum Eszközök Ablak Sütő Judit Gubányi

Felvételi dokumentumok Monitor paraméterek Folyadéknap Jegyzetek Rendelések Rendelés bevitel Gyógyszer-adagolási jegyzőkönyv Gyógyszerek áttekintése Vízrendelési jegyzőkönyv Munkakoppa Labor eredmények Összefoglalás

2019.01.16. Folyadéknap (PTE AITI 2) 2019.01.18. 2019.01.19.

[Auto-adatrögzítés 30 percenként] 21:00 22:00 23:00 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00

▲ Σ be (24h) 2 000
 ▼ Σ ki (24h) 1 500
 ● Nettó sz... 1 000
 500
 0
 -500
 -1 000
 -1 500
 -2 000

Folyadéknap grafikon napi
 Folyadéknap görgetett
 Bemenő
 Kimenő
 Egyenleg
 Kanülök
 Diéta típusa

Amiodaron (Cordarone) 900 mg in 48 ml 5% Glucose oldat
 Noradrenalin 4 mg in 50 ml 0,9% NaCl Normál sóoldat
 Inzulin (Actrapid) 50 E in 50 ml 0,9% NaCl Normál sóoldat
 Propofol 1000 mg in 50 ml Gyári oldószér 16
 Sufentanyl 50 µg in 50 ml 0,9% NaCl Normál sóoldat
 Moxifloxacin (Avelox) 400 mg IV 24 óránként
 Egyéb kimenet: Perspiráció
 GI: hányás
 Σ be (24h) 123 (238)
 Σ ki (24h) 50 (+121)
 Nettó szervezeti egyenleg (24h) +11
 Net. szerv. egyenl. (tart. h.) +4
 Centrális kanül: V. jugularis
 Art.: A. radialis, jobb I.d.
 PVK: Kar, jobb
 PVK: Bal térd felett véna
 Vizelet: Foley-katéter
 Mellkas: Mellkas alsó része, job 300(300)

Infúziós pumpák társítása
 Pumpa társításához válasszon ki egy elérhető pumpát és egy infúziót, majd nyomja meg a Társítás megszüntetésehez válasszon ki egy társított pumpát, majd nyomja meg a Társítás megszüntetése ikont.

Elérhető pumpák

Pumpaazonosító	Folyadék neve	Állapot
AlarisAGWDriver 1352-28317	Inzulin (Actrapid)	4 ml/h
AlarisAGWDriver 1352-28399		2 ml/h

Frissítés

Társított pumpák

I	Pumpa társítása	Állapot	Pumpaidő
	Amiodaron (Cordarone) mg/...		
	AlarisAGWDriver 1352-2... 1,97 ml/h	Indítás: 2019.01.19. 13:59	
	Inzulin (Actrapid) E/óra 1 E/ml	Nincs pumpa	3,9 0 1,1 3,5 6,4(38,4)
	Noradrenalin µg/perc 80 µg/...		
	AlarisAGWDriver 1352-2... 8 ml/h	Indítás: 2019.01.18. 12:35	2 2 2 3,2 6,9(19,2)
	Propofol mg/óra 20 mg/ml		
	AlarisAGWDriver 1352-2... 10 ml/h	Indítás: 2019.01.18. 14:20	11 12,4 10 9,8 9,9(91,9)
	Sterofundin B		
	AlarisAGWDriver 1352-2... 50 ml/h	Indítás: 2019.01.18. 3:08	4,7 9,7 3,9 9,3 4(46,6)
	Sufentanyl µg/óra 1 µg/ml		
	AlarisAGWDriver 1352-2... 4 ml/h	Indítás: 2019.01.18. 14:23	
	Víz	Nincs pumpa	
	Víz	Nincs pumpa	

OK Mégse

174 (823) 149 (972) 128 (1099) 126 (1225) 261 (1487)
 40 (+240) 130 (+370) 220 (+590) 150 (+740)
 +583 +602 +509 +485 +747
 +217 +236 +143 +119 +381
 40 130 220 150 (740)
 (0)

MŰSZAK ÁTADÓ

Ez nem egészen olyan formában érhető el, mint a papír lázlapon, de nagyon hasonló.

A felső sorban kiválasztom a „Jegyzetek” fület, az „Ápolási dekurzus” nevű részbe tudok írni.

Jobb klikkel rányomok az „Ápolási dekurzus”-ra, kiválasztom az „újabb ápolási jegyzet” opciót, megnyomom, így megnyit egy üres napot az aktuális dátummal és időponttal. Ebből annyit csinálhatok, amennyit akarok, de érdemes műszakonként egyet nyitni.

az „Ápolási folyamat jegyzet”-re jobb klikk:

Philips IntelliSpace CCA - [AITI - 110]

Fáj | Szerkesztés | Nézet | Betegkarton | Dokumentum | Eszközök | Ablak | Súgó | Judit Lubonyi

Felvételi dokumentumok | Monitor paraméterek | Folyadéknap | **Jegyzetek** | Rendelések | Rendelés bevtela | Gyógyszer-adagolási jegyzőkönyv | Gyógyszerek áttekintése | Vízrendelési jegyzőkönyv | Munkamappa | Labor eredmények | Összefoglalás

2019.09.30. **Ápolási folyamat jegyzet** 2019.09.30. 0:44

Jegyzet

2019.09.29. **Vizsgálat**

2019.09.29. Ápolási folyamat jegyzet 4.1

2019.09.28. Orvosi dekurzus 13:36 (HI)

2019.09.28. Ápolási folyamat jegyzet 13

Neurológiai vizsgálat	
Légzőszervi vizsgálat	
Tüdőhangok (bal)	
Tüdőhangok (jobb)	
Szívhangok	
Has tapintása	
Bélhangok	

2019.09.29. 9:49 Leválasztott infúziós pumpák.

Warning
Ez a betegkarton nem az ehhez a munkaállomáshoz beállított ágyban lévő betegél

2019.09.30. 0:44


LABORATÓRIUMI EREDMÉNYEK

A „labor eredmények” lapon az osztályon készült vérgáz eredmények illetve a laborba felküldött vérminta eredmények láthatók. Még egy funkciója van ennek a lapnak, a mikrobiológiai leoltásokat tudjuk rajta jelezni (nem az eredményeket, csak azt, hogy mikor küldtünk mintát).

Bal oldalon lel van sorolva a vérgáz, labor táblázat ITO és mikrobiológia. Amire kíváncsiak vagyunk, azt a sort megnyitjuk bal egérgomb – klikk-el.

A vércukor értékeknek létrehoztak egy sort a „monitor paraméterek” fülön az alsó sorban a kezelések között, így nem kell a laboros lapra írni a 2 vagy 4 óránkénti vércukrot, a lapon látható ugyanúgy, mint a papír lázlapon.

Mikrobiológiai leoltások felvitele: bal klikk a „mikrobiológiai leoltások” fülre. A felirat melletti kis nyílra kattintva kinyílik a panel,

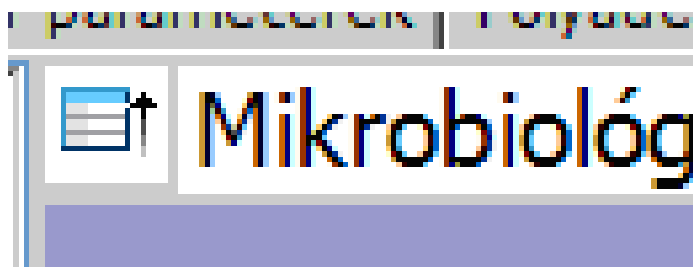

adatait.

oda lehet beírni a levett minták

Philips IntelliSpace CC

Fájl Szerkesztés Nézet Dokumentumok Csakúton Alakú Dajgo Junt Gubanyi

Látogatási előzmények

2019.09.27. Fekvőbet

Astrup (pte-to)
 Astrup (pte-to)
 Labor táblázat (pte-to)
 2019.09.23.
 Mikrobiológiai leoltások 1
 2019.09.05.
 Mikrobiológiai leoltások 16:40

Felvételi dokumentumok | Monitor paraméterek | Folyadéknap | Jegyzetek | Rendelések | Rendelés bevitel | Gyógyszer-adagolási jegyzőkönyv | Gyógyszerek áttekintése | Vízrendelési jegyzőkönyv | Munkamappa | Labor eredmények | Összefoglalás

Mikrobiológiai leoltások 2019.09.23. 16:54

Mikrobiológiai leoltás	
Vér, HK	09.17; 09.22
Kanülök	CVK vég. 09.13
Trachea váladék, BAL	09.13; 09.17
Vizelet	09.13;09.17
Seb váladék	09.16; 09.17
ÁNTSZ	
Egyéb	

ELBOCSÁTÁS

Ha a beteget a Medsolban elbocsátják, a lázlapban is lekerül az ágyról „nincs ágy” státuszba, de az osztály összes betegében még megtalálható, bármikor újra lehet nyitni a lázlapot és megnézni bármit. Ha nem „belső áthelyezés” – el bocsátják el, akkor az „Elbocsátott betegek” között lehet megtalálni a lázlapját. (Ablak – AITI összesítés)

Fájl Szerkesztés Nézet Beteg/karton Dokumentum Eszközök Ablak Súgó Pic Teszt GYK

Felosztás
ATTI összesítés
ATTI - ITO 3 - Teszt Piroška | KBA: | Életkor felvételkor (számított): 108 | Kezelőorvos: | Ujréelesztésre vonatkozó állapot:

Gyógyszer-adagolási jegyzőkönyv Gyógyszerek áttekintése Vizitrendelési jegyzőkönyv Munkamappa Labor eredmények Összefoglalás

2019.01.19. 14:50


Ápolási folyamat jegyzet

Jegyzet

Vizsgálat

Neurológiai vizsgálat	
Légzőszervi vizsgálat	
Tüdőhangok (bal)	
Tüdőhangok (jobb)	
Szívhangok	
Has tapintása	
Bélhangok	

2019.01.19. 14:51

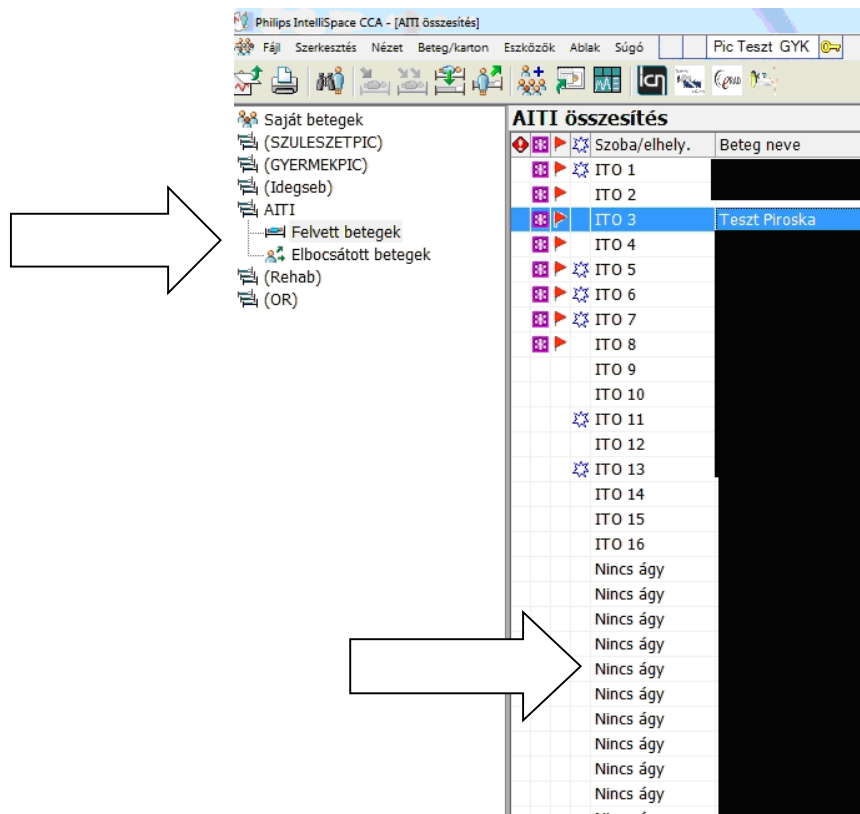

Ha egy beteget újra felvesszünk, a régi lázlap akkor sem használható, ha még a listában van, mert új esetszámot kap a beteg, ezért rendszer nem kezeli azonos betegként.